

Limity ordinační bělení v ordinaci

Dlouhé aplikace **vysoce koncentrovaných peroxidů vodíku při terapiích delších než hodinu mohou být pro pacienty nejen nepříjemné**, ale často vedou k **dehydrataci skloviny**. Výsledek bělicího ošetření je tak "pozměněn" intenzivním, ale neprůhledným bílým povrchem zubu. Tento "bílý efekt" jistě zaznamená **krátkodobou regresí** a v některých případech (pacienti, kteří kouří nebo jsou zvyklí pít čaj/kávu) **může dokonce ustoupit ještě dále než odstín před ošetřením bez bílé diety**.

Použití vysokých koncentrací vodíkových peroxidů v kombinaci s dlouhou dobou kontaktu (40-60 minut) vytváří „tekutou fázi“, která umožňuje peroxidu **snadno proniknout do mikrofraktur skloviny a pod ochranu dásní**.

To zvyšuje riziko nežádoucích účinků.

Podle nedávného průzkumu¹ jsou nejčastějšími nepříjemnými problémy, se kterými se setkáváme po profesionálním bělení:

- 29 % Dlouhodobá (více než 1 den) citlivost zubů
- 25 % Dočasná citlivost zubů (max. 24 hodin)
- 12 % Podráždění/bělení dásní
- 5 % Popálení rtů nebo kůže

Je dobré mít na paměti, že to, co bylo použito, je **extrémně agresivní lékařské bělení, které ve snaze splnit očekávání pacientů by nemělo být posunuto za hranice svých možností**.

Při 40% obsahu peroxidu vodíku stačí pouhých 60 minut k poškození skloviny...

Co se může stát, pokud se ošetření opakuje vícekrát po sobě v krátkém časovém úseku?

Aby se tyto nežádoucí účinky kompenzovaly, obsahují všechna peroxidová bělení ve svém složení nebo jako funkci po ošetření **desenzibilizační nebo remineralizační látky**. Některé dokonce **doporučují před ošetřením a po něm použít léky proti bolesti**.



ULTRA+

Na rozdíl od non plus ultra, což znamená: „**překračovat**“ **překonané hranice**.

V roce 1492 se Kryštof Kolumbus z Janova plavil za hranice. Odhodlaný překonat své limity... Objevil Nový svět.

ULTRA+ Překročení hranic ordinačního bělení

¹ - Postup bělení pro italské pacienty Keystone Dental Monitor únor 2022







ULTRA+ Ošetření	
 REF 012001	BlancOne® ULTRA + Single Kit 3x cyklus BlancOne ULTRA+: 1 x bělicí gel 0,75ml 1 x Photo Booster 0,25ml DUETTO 1 x BlancOne® Gingivální Bariéra 1,20ml
 REF 012003	BlancOne® ULTRA + Multi Kit 9 x cyklus BlancOne ULTRA+: 1x Bělicí Gel 0,75ml 1 x BlancOne © Gingivální bariéra 1,20 ml
CARE Doplnky	
 REF 019002	Gingivální bariéra 1,20 ml
 REF 030105 REF 030106 REF 030107	1 x BlancOne® Rozvěrač - S 1 x BlancOne® Rozvěrač - M 1 x BlancOne®e Rozvěrač - L
 REF 030108	30 x BlancOne® Ochrana tváří

BlancOne® ULTRA+ je zdravotnický prostředek CE pro ošetření výrazných diskolorací určený výhradně pro profesionální použití v ordinaci zubních lékařů a dentálních hygienistek.

BLANCONE®

www.blancone.eu/cz
beleni@blancone.cz

 [blancone.eu](https://www.facebook.com/blancone.eu)  [blancone_ids](https://www.instagram.com/blancone_ids)  [blancone](https://www.youtube.com/blancone)
 [blancone_cz_sk](https://www.skype.com/blancone_cz_sk)



Blanc Dental SE - Křížovnická 86/6 - Praha 110 00
tel.: +420 723 616 888 - email: beleni@blancone.cz
www.blancone.eu/cz

BlancOne je registrovaná obchodní značka IDS Spa

Rev 1 - 15/6/23



ULTRA+

Plus Ultra
Za hranicemi ordinačního bělení

BLANCONE®

Bělení pro vás

NON PLUS ULTRA?

Non plus ultra je latinský výraz, který znamená „ne dále než“

Historicky odkazuje na Herkulovy sloupy, které představovaly konec „známého světa“.



Jedinou možností, jak dosáhnout špičkových výsledků bělení během jediného sezení, je **bělení zubů v ordinaci pomocí vysoce koncentrovaných peroxidů**.

Na rozdíl od domácího ošetření, které poskytuje postupné výsledky, méně patrné pro pacienty, **tento druh ošetření dokáže řešit i ta nejzávažnější zbarvení s okamžitými výsledky bez nutnosti nosit dlahy po dobu několika týdnů**.

Se zřetelným rozdílem před a po, kterého dosáhne profesionál v ordinaci, a nikoli pacient doma, tento druh ošetření „non plus ultra“ **profesionální bělení dokáže uspokojit pacienty, kteří mají velkou motivaci ke zlepšení svého úsměvu a mají značná očekávání i finanční možnosti**. Tito pacienti **chtějí to nejlepší, co se týče výsledků bělení a trvanlivosti v čase...** a samozřejmě to chtějí **hned**.



Nejlepší výsledek, trvalý a hned. Dobře, ale za jakou cenu?



To nejlepší pro vaše pacienty



2000
Zubaři a vědci Piergallini a Loupis zahájili svůj výzkum v oblasti fotochemie.



2010
Technologie BlancOne® 1.0
Poprvé na trhu bělení v rychlosti světla.



2016
Technologie BlancOne® 2.0 První
10minutové bělení po dentální hygieně
dobývá trh.




2022
Technologie BlancOne® 3.0
Fotochemie posouvá výkon
bělení za jeho hranice

To nejlepší pro vás

Dosud nevídaná účinnost bělení

Testy in vitro provedené na katedře DICCA Fakulty strojního inženýrství Janovské univerzity prokázaly mimořádnou účinnost BlancOne® Ultra* při zlepšování jasu zubní struktury ve srovnání s nejlepšími ordinárními ošetřeními na současném trhu.

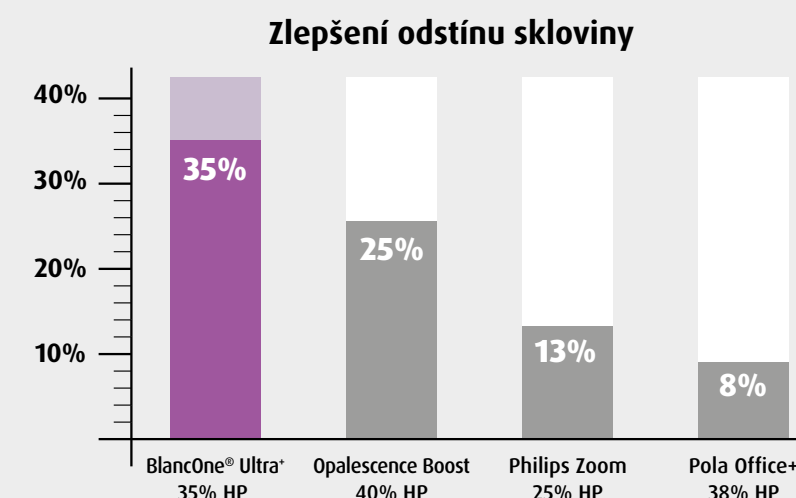


Zkrácení doby kontaktu o více než polovinu


Těchto výsledků bylo dosaženo při použití základního protokolu BlancOne® Ultra*, 3 cykly po 8 minutách, na rozdíl od maximálních protokolů doporučovaných konkurencí, čímž se spojuje nejlepší účinnost a pohodlí pacientů se zkrácenou ordinární dobou.




BlancOne® Ultra*
(3x8=24 minut)

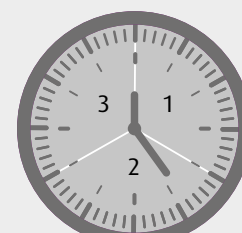

Opalescence Boost
(3x20=60 minut)

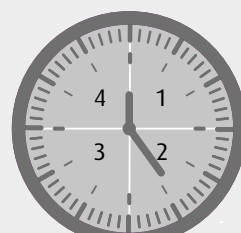

Philips Zoom
(4x15=60 minut)

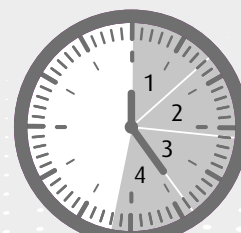

Pola Office+
(4x8=32 minut)



Chiara Lorenzi
★★★★★

„S výsledky dosaženými díky novému Ultra* jsem velmi spokojená. Velmi oceňuji krémovou texturu, díky které se snadno míchá a nanáší. Gel lze snadno odstranit a opláchnout. Vynikající účinnost bělení, která se ukázala jako vynikající.“



Valentino Natoli
★★★★★

„S produktem se mi velmi snadno manipulovalo a používal se bez problémů s citlivostí po zákroku. Vynikající výsledky a super spokojení pacienti.“



Romina Rossoli
★★★★★

„Výsledný jas a stabilita výsledku je vynikající, moji pacienti jsou velmi spokojeni. Balení včetně jednodávkových injekčních stříkaček je praktické a flexibilní, když je například potřeba bělení podstoupit pouze na špičkách.“

Dlouhodobé výsledky v čase

Díky rychlé době aplikace je výsledkem 100% skutečné bělení, nikoliv dehydratace.

Výsledný bílý odstín je přirozený, zářivý a stabilní, čímž se zamezí rychlé regresi po opětovném hydratování zubů.


Výrazné uvolňování singletového kyslíku ve struktuře zubu zaručuje kontinuální bělicí účinek během následujících 72 hodin s jeho dalším zlepšením.

Nulová citlivost zubů


Nová bělicí gelová matrice BlancOne® Ultra* neobsahuje „tekutou fázi“ a minimalizuje tak možnost infiltrace peroxidu do mikrofraktur zubní skloviny a pod gingivální bariéru.

Tímto způsobem je prakticky odstraněno riziko citlivosti zubů a bolestivého popálení gingiválních tkání Ultra* neobsahuje látky snižující citlivost.

Stabilita výsledku v čase

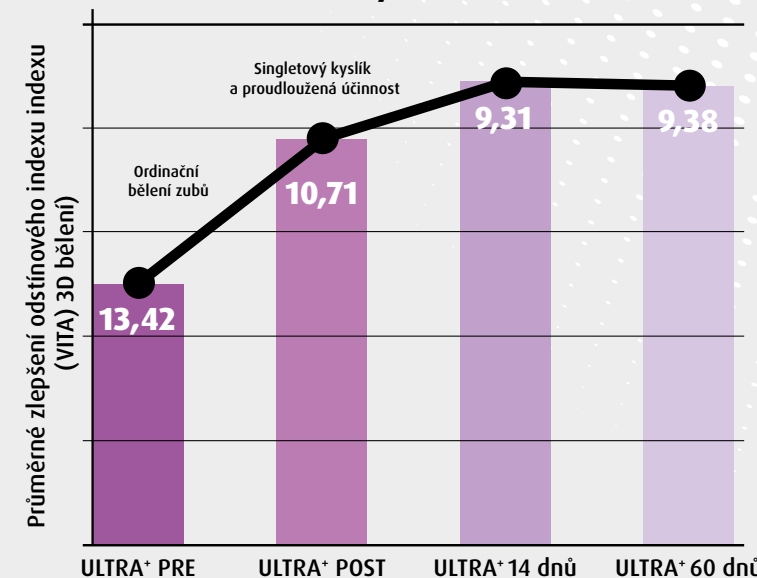


Incidence hypersensitivity

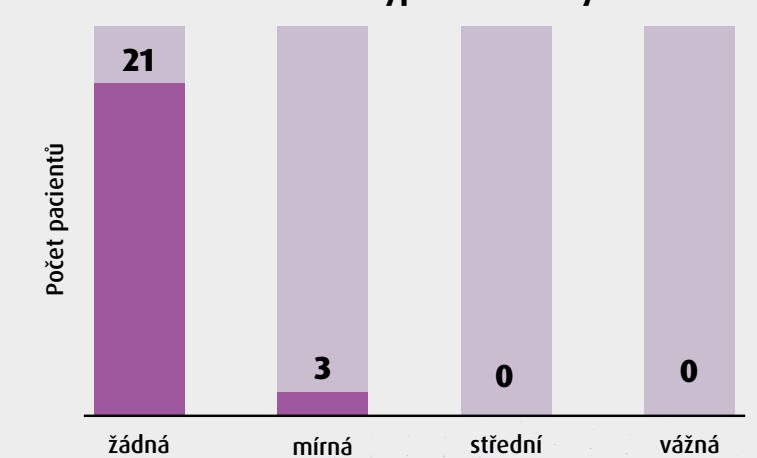

Zachování skloviny

Testy in vitro provedené na katedře DICCA Fakulty strojního inženýrství Janovské univerzity ukazují, že čím delší je doba kontaktu vysokoprocentních peroxidových gelů se zubními prvky, tím větší je riziko ohrožení integrity struktury skloviny.

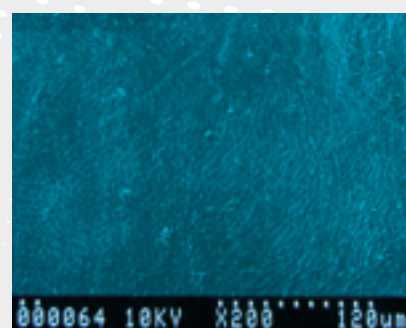

Neošetřená sklovina



Leptaná sklovina po 60minutových cyklech se 40% peroxidem vodíku

Naopak BlancOne® Ultra*, díky nižší koncentraci a kratší době kontaktu, způsobuje pouze mírné a dočasné změny, respektuje povrch skloviny, a proto není třeba používat remineralizační prostředky.



Stefano Checchi
Silvia Fasoglio
★★★★★

„Nová verze produktu, která ještě více rozšíří různé možnosti ošetření a učiní z každého bělení jedinečný zážitek!“



Giuseppe Lipani
★★★★★

„Bělicí přípravek se ukázal jako vysoce účinný, velmi snadno se míchá, aplikuje a odstraňuje. Neměl jsem žádný problém s citlivostí, a to jak během ošetření, tak po něm. Zuby jsou na pohled zářivé a nejsou dehydratované. Vynikající jednodávkové balení je univerzální a umožňuje bělení i jednoho zubu nebo oblouku bez plýtvání přípravkem.“



Giulia Zanconato
★★★★★

„Opravdu věřím v sílu úsměvu, protože jsem byla svědkem mnoha pacientů, jejichž život se po použití produktů BlancOne zlepšil, dnes ještě více díky novému Ultra.“

Gel-gel míchání

Míchání a příprava gelu BlancOne® Ultra* probíhá snadným a rychlým spojením dvou injekčních stříkaček (foto booster + bělicí gel).

Krémová textura

Krémová textura umožňuje bezproblémové nanesení gelu na povrch zubu, pevně, bez ulpívání nebo vytékání a snadné odstranění.

Balení po jedné dávce

BlancOne® Ultra* se dodává v jednodávkových baleních, což zaručuje maximální výkon právě namíchaného gelu a maximální flexibilitu použití při volbě protokolu podle různých klinických potřeb.

Skladování v nechlazeném prostředí

Díky nové matici bělicího gelu lze BlancOne® Ultra* skladovat v nechlazeném prostředí až 24 měsíců od data výroby.

Dva produkty v jednom

BlancOne® Ultra* lze použít jak na povrchu zubu, tak v **pulpální komoře**, což umožňuje ošetření vitálních i **nevitálních zubů** v ordinaci.



Aldo Mazzella
★★★★★

„Nový Ultra je vysoce účinný přípravek i silně diskolorované nevitálně zuby, použila jsem ho při několika cyklech s úžasnými výsledky, vřele doporučuji.“



Claudio Pasquale
★★★★★

„Produkt BlancOne Ultra* splňuje všechny potřeby profesionálů, plně využívá fotochemický aktivační potenciál produktu a poskytuje našim pacientům vynikající výsledek, který přetrvává v čase.“

